

ПРОБИРКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ PRP KIT Y-STEM 2.0



Пробирка **PRP KIT Y-STEM 2.0** имеет специальную (уникальную) форму "песочных часов", что позволяет после центрифугирования крови легко выделить плазму богатую тромбоцитами.



В вакуумной упаковке содержится 10 стерильных пробирок **PRP KIT Y-STEM 2.0**. Каждая пробирка в индивидуальной упаковке.




PRP – современный инструмент эстетической медицины, позволяющей омолаживать и восстанавливать кожу естественным путем - с помощью инъекций аутологичной плазмы с повышенным содержанием тромбоцитов более 1 000 000 в 1 мкл, полученной из собственной крови пациента.

ПРОБИРКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ PRP KIT Y-STEM 2.0


В СОСТАВЕ:

- + пробирка
- + крышка
- + поршень для
продвижения
крови

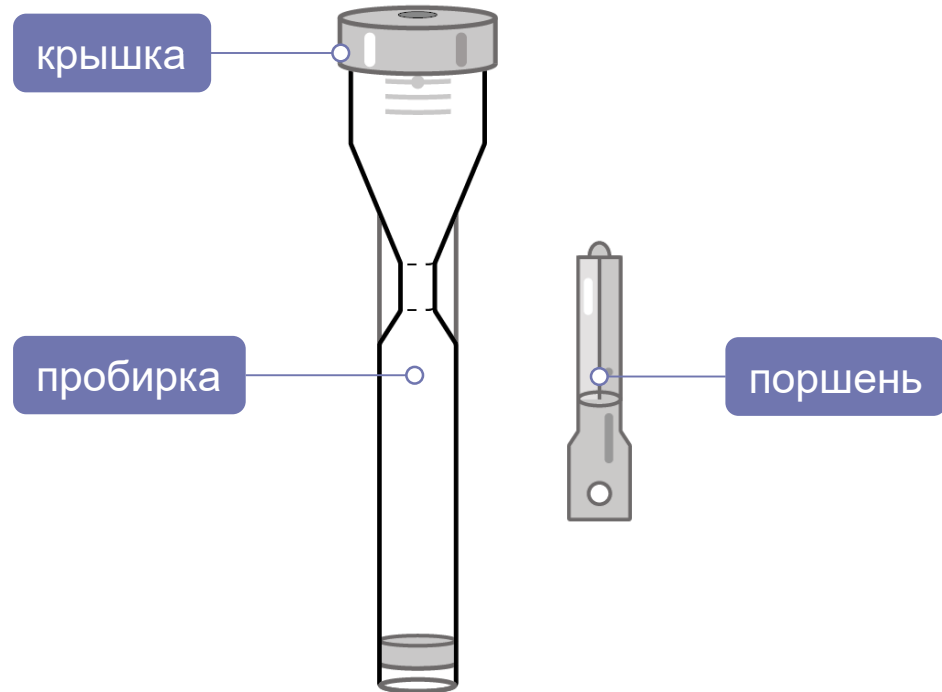


ПРОБИРКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ PRP KIT Y-STEM 2.0

- + **Конусообразная форма** пробирки дает четкое разделение плазмы, эритромаcсы, PRP- массы.
- + **Риски уровня наполняемости крови**
 - Верхняя – для пациентов с анемией
 - Средняя для женщин
 - Нижняя для мужчин

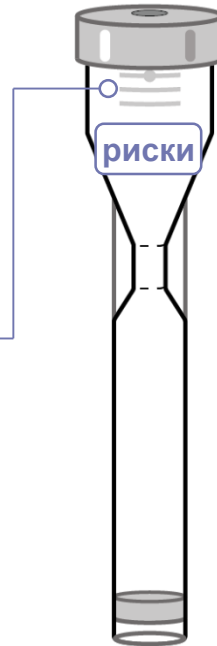


С помощью поршня можно поднять уровень PRP-массы, надавив поршнем низ пробирки.

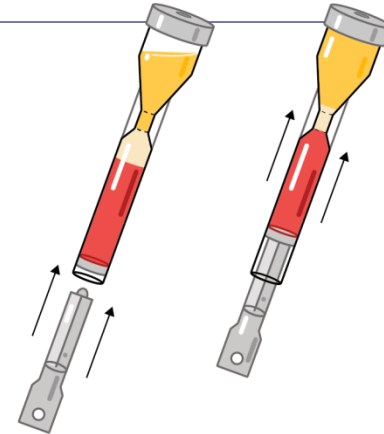

ПРОБИРКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ PRP KIT Y-STEM 2.0

ОСОБЕННОСТИ:

- + Максимальный объем PRP до 3 мл.
- + Уникальная конструкция пробирки, дает точное извлечение PRP-массы, за счет узкой и прозрачной горловины пробирки.
- + Универсальный размер пробирки — для всех типов центрифуг (с угловым ротором и ротором крестовиной).

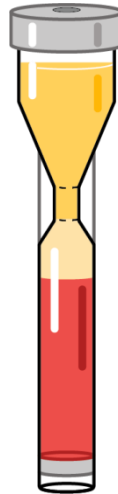

- + С помощью поршня можно поднять уровень PRP-массы.
- + Пробирка имеет предохранительный стабилизатор, что предотвращает разлом во время центрифугирования.
- + Стерильность пробирки.
- + Изделие сертифицировано и имеет регистрационное удостоверение.
- + Универсальность применения

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Шприц 20 мл

1



Шприц 5 мл

1



Гемоконсервант ЦФГ (цитрат-фосфат-
глюкоза) 2 мл

1



Игла для мезотерапии 0,3×13

2



Игла 21G×1½ (0,8×40 мм)

1



Пробирка PRP KIT Y-STEM 2.0)

1



Игла 18G×90 мм для забора PRP-массы

1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



- **ИГЛЫ 18G** для забора PRP-массы из узкого горлышка пробирки
- **ШПРИЦ** с системой луер-лок предотвращает вероятность срыва иглы.
- **ИГЛЫ С ЛАЗЕРНОЙ ЗАТОЧКОЙ** позволяют практически исключить болевые ощущения от процедуры и значительно увеличить степень удовлетворенности пациенток.